



Fapa s.a.s.

Via Pascoletto, 20 24040 Lallio (BG)

Tel. 035.6221219 Fax. 035.4372675

fapa@fapa.bg.it

www.fapa.bg.it

AGITATORE PER MICROTITER

**MOD. 715 +
COD. 29970005**

CODICE CIVAB ALAASA75



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2001

DESCRIZIONE

L'agitatore a vibrazione rotatoria (eccentricità 3.7 mm) per microtiter mod. 715 + è predisposto per contenere fino a 4 piastre Microtiter fissate con molla in acciaio nichelato.

Funzionamento in continuo o prefissato mediante timer fino a 60 minuti, regolazione elettronica della velocità da 300 a 1500 giri/minuto.

Costruzione esterna in acciaio con verniciatura in polvere antiacida. Piano di lavoro in alluminio ossidato.

Interruttore generale luminoso.

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni piano di lavoro LxP: 295 x 200 mm.
- ◆ Dimensioni d'ingombro LxPxA: 300 x 300 x 200 mm.
- ◆ Peso massimo di carico sul piano di lavoro 0,5 kg.
- ◆ Peso 9 Kg.

DATI ELETTRICI

- ◆ Alimentazione elettrica 220 V - 50 Hz.
- ◆ Assorbimento 30 W
- ◆ Fusibili di protezione 2 fusibili x 0,5 A F(5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete 10 A

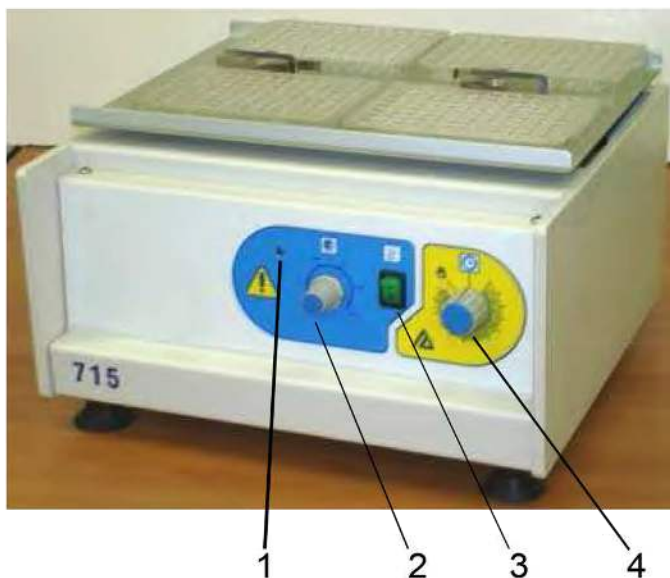


Fig. 1

- 1 Spia piano agitatore in funzione / Signal lamp for stirrer in function
- 2 Regolatore velocità agitatore / Speed controller
- 3 Interruttore generale luminoso / Main switch bright
- 4 Temporizzatore / Timer

I fusibili di protezione (0.5 A F 5x20) mm. sono situati sul retro dell'apparecchio
Overload fuses (0.5 A F 5x20) mm. are on the rear



Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20
24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219
Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it